



ImplantMED Surgical Motor Unit

W&H 廠牌 植牙手術馬達

全套配件：

- 控制主機
- 多功能腳踏板
- 手機線
- 20:1手機
- 放置架



W&H Surgical Handpiece

植牙專用手機

20:1 Surgical Contra-Angle Handpiece

植牙專用手機20:1

帶光纖

編號：WS-75LG



不帶光纖

編號：WI-75E



1:2.7 Surgical Contra-Angle Handpiece(WS-92 E/3)

高速手機1:2.7



1:1 Surgical Straight Handpiece(S-11)

高速手機（直機）1:1



1:2 Surgical Angled Handpiece(S-12)

高速手機（彎機）1:2



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



NSK 日本製

耀眼輕盈 耳目一新 Surgic Pro LED 植牙馬達


優點：

- 扭力強大(可達80Ncm)
- 轉速範圍廣(200至40,000min⁻³)
- 扭力準確性高
- 馬達輕量化
- LED照明 (超過32,000LUX)
- 耐用性卓越
- 可高壓高溫滅菌、熱沖洗、無碳刷設計



Surgic Pro


LED
整組 帶光纖 / 不帶光纖

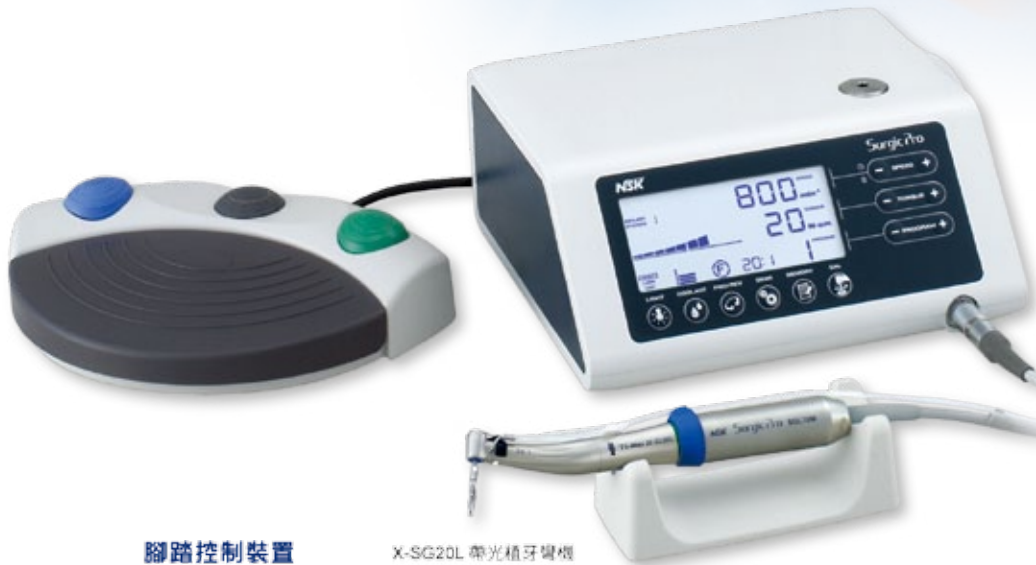

腳踏控制裝置
掌控全局

X-SG20L 帶光纖植牙手機

使用者不需碰觸面板，即可輕易的透過腳踏開關操作所有功能，避免馬達運作不慎超出預設範圍。Surgic Pro 的腳踏開關裝置符合 IPX8 標準。

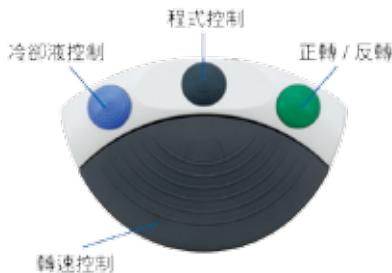

Surgic手機 X-SG20L 帶光纖



光纖玻璃體
指壓式 減速 20:1 純鈦金屬機身與DURACOAT抗刮技術

Surgic手機 SG20 不帶光纖



指壓式 減速 20:1 不鏽鋼機身

W&H MD-4 手機專用保養油

編號：A1ETS04 (不含配件)



W&H 手機保養油專用接頭

編號：A1YSCS01



矽膠管 (植牙機專用, 吸引器專用) 可高消

規格：內徑 x 外徑 mm


規格：1x3 mm、2x4 mm、3x5 mm、4x6 mm、6.5x11 mm、7x11 mm、9x14 mm




取出 Abutment 斷裂 Screw 的好幫手

Screw fracture Remover 1.6mm

編號：3-A-CSR16-S

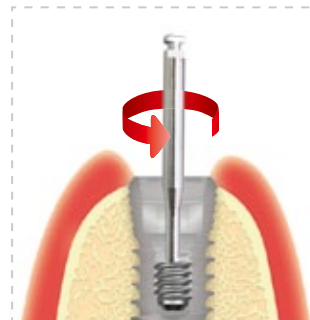

斜面設計 更易吻合斷裂面
15 rpm reverse
詳細操作方式請洽業務人員

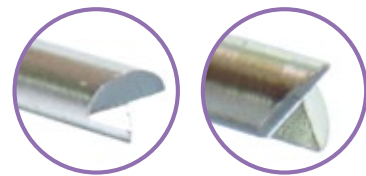


MOBILE TREATMENT TROLLEY

編號：W-747-3700



示意圖

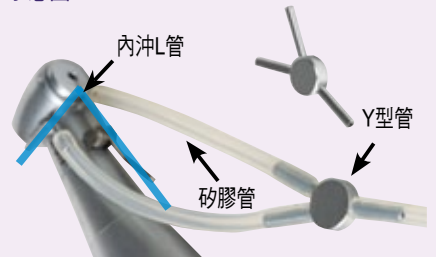

植牙手機專用 Y型管L型管 可高溫高壓消毒專用

Irrigation "Y" Connector, Tubing, And Irrigation Needle



W&H Y型管，一端金屬兩端是矽膠管
編號：O-D-06016400

編號：W-6381777 Y型接頭 (美製)

編號：O-Y001-1 Y型接頭 (台製)



編號：L001 L型接頭 (台製-無Tip)

編號：O-D-02610500 (奧地利製-無Tip)

編號：W-6560002 (美製)





Surgical Aspirators 吸引先

1.6mm
2mm
2.98mm

Surgical Aspirator
編號：3-L-30-230
6Fg 長19cm，直徑1.6mm

Surgical Aspirator
編號：3-L-30-232
8Fg 長19cm，直徑2mm

Surgical Aspirator
編號：3-L-30-234
10Fg 長19cm，直徑2.98mm

Surgical Aspirator
編號：3-L-30-236
12Fg 長19cm，直徑約4mm

Control Suction By Covering Relief Hole




移動式 吸引器(圓錶式)

編號：80-T-DF-650A



直立式吸引器-轉接頭(公頭)

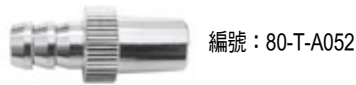


編號：80-T-A052

可接 9x14mm 矽膠管

直立式吸引器-轉接頭(母頭)



編號：80-T-A053

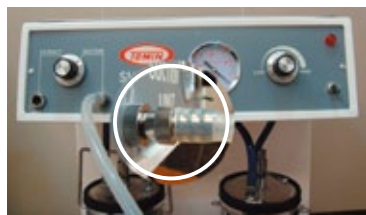

矽膠管 (植牙機專用，吸引器專用) 可高消

規格：內徑x外徑 mm

規格：1x3mm、2x4mm、3x5mm、4x6mm、6.5x11mm、7x11mm、9x14mm



Cleaning Brushes 不鏽鋼吸管清潔刷



編號	毛徑	毛長	全長cm
2-E-36-104001	1ml 0.3	12	42cm
2-E-36-104002	2ml 0.5	12	42cm
2-E-36-104005	5ml 0.8	12	42cm
2-E-36-104010	10ml 1	12	42cm
2-E-36-104020	20ml 1.9	12	42cm



Right Angled Driver

手機型 扭力扳手

有15-35Ncm 多樣設計可做選擇，
讓您手術上扭力更駕輕就熟



15Ncm 20Ncm 25Ncm 30Ncm 35Ncm

產品編號	產品規格
U-F-ID801	Right Angled Drive 植牙扭力扳手
U-F-ID801-15N	Torque Adapter 15N (銀色) for ID801
U-F-ID801-20N	Torque Adapter 20N (橘色) for ID801
U-F-ID801-25N	Torque Adapter 25N (紅色) for ID801
U-F-ID801-30N	Torque Adapter 30N (藍色) for ID801
U-F-ID801-35N	Torque Adapter 35N (綠色) for ID801



美國品牌

Bits for Right Angled Drivers



編號：OTABITS

Compatible with all major implant systems

美國原裝進口 · 品質保證

Right Angled Driver

- Easily connects to Right Angled Driver(RAD)
- Autoclavable
- 有7種扭力
- 10, 15, 20, 25, 30, 32, 35Ncm



編號：ATA
有7種扭力
Torque Adapter



編號：RAD
手機型 扭力扳手
Right Angle Driver

	Latch-type Bits	Part no.
— Straight Screwdriver	Straight systems	BIT1
★ SCS Screwdriver	Straumann	BIT2
★ UniGrip Driver	Replace Select	BIT3
● Hex 1.3mm/.050 inch	Lifecore Biohorizons, Astra, Zimmer	BIT4
● Hex 1.2mm/.048 inch	3i System	BIT5
● Hex 0.9mm/.035 inch	Frident, ankylos, 3i CoverScrew	BIT6
■ Square 1.3mm/.050 inch	Gold Serew / Nobel, Biocare	BIT7



宏國HUNG KUO

訂購專線：05-2332158, 2332178, 7812829

本DM僅供專業人士參考 2017.12

通用各大廠牌扭力扳手



W&H 電子式手機 全自動扭力扳手

馬達型號:	IA-400
電池類型:	鋰電池
電池電壓:	3.7V
標準容量:	680mAh
齒輪速度:	25mm/s
扭力:	8-40Ncm
充電時間:	約120分鐘
電池電量:	在平均扭力時的約40顆螺絲
重量:	92g

型號: IA-400
編號: WH-16934000

實用快速，且無風險。可單手操作證明全自動扭力扳手操作快速，更重要的是，安全且可提供清晰的治療視野。



精確的扭矩控制
可在8至40Ncm之間調節，每次調節1Ncm，這可確保固定螺絲時更精確且無風險。



啟動板
透過啟動板可靈活操作全自動扭力扳手。



無線操作
全自動扭力扳手的現代鋰電池技術讓所有操作無障礙。



可獲取最佳視野的小鏡頭
沒有什麼能阻礙您查看治療位置。



省時的等速運轉
每分鐘轉動次數達25次，意即10秒鐘之內就可以固定一顆螺絲。



良好潤滑，增長使用壽命
可高溫滅菌消毒的彎手機應透過潤滑劑來延長使用壽命，切勿上油。

Torque-Lock

Torque-Lock 2[®]

多功能扭力扳手



開放式扭力桿和指標設計，操作容易拆卸簡單，方便清潔和高溫高壓消毒扭力有**10-35Ncm**及**35-70Ncm**二種

High Torque Surgical Wrench
編號: TL2H 35-70Ncm


Torque Adapter Driver
編號: TLAD

Low Torque Prosthetic Wrench
編號: TL2L 10-35Ncm






方形接頭 Driver tip

4 


16mm 0.05hex
編號: TLDS

5 

24mm 0.05hex
編號: TLDL


二階Tip



方形頭改動手動套筒
編號: 07-0190

6 

彎機改手動轉接頭 編號: W-20-1554-11 **7**

Driver Converter
14mm long, secures and locks contra shaft for hand or ratchet drive

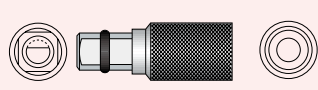

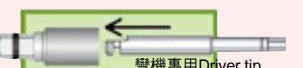圖示  彎機專用Driver tip  完成

若您的Driver tip不是方型接頭，可利用您系統上的彎機專用Driver tip (如圖示)再接上**專用轉接頭(W-20-1554-11)**，即可與全方位扭力扳手搭配使用。

通用各大廠牌扭力扳手

Keystone 全功能扭力扳手

TiLobe Surgical Ratchet 50Ncm+R / Torque Wrench



編號：C-TILOBE-Y-K15695


轉接頭

TiLobe Ratchet/MAX Latch Tap
Ratchet Adapter for MAX implants



編號：C-TILOBE-Y-K15850K

宏國 全功能扭力扳手 and Drivers

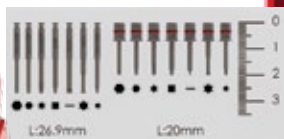

15, 25, 35, 50 Ncm



全方位扭力控制扳手

無關節設計控制精準，能一次滿足您各種不同扭力上的需求

Nine Torque Settings 扭力扳手(多家植牙廠牌皆適用)

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 & 60 Ncm

編號：OTAATW



Bits for Right Angled Drives (接手機的各式Driver) 美國品牌

Compatible with all major implant systems 編號：OTABITS



	Latch-type Bits	Part no.
— Straight Screwdriver	Straight systems	BIT1
★ SCS Screwdriver	Straumann	BIT2
★ UniGrip Driver	Replace Select	BIT3
● Hex 1.3mm/.050 inch	Lifecore Biohorizons, Astra, Zimmer	BIT4
● Hex 1.2mm/.048 inch	3i System	BIT5
● Hex 0.9mm/.035 inch	Friadent, ankylos, 3i CoverScrew	BIT6
■ Square 1.3mm/.050 inch	Gold Serew / Nobel, Biocare	BIT7



Bits for Implant Drives (用於手動扳手)

美國品牌



— Straight Screwdriver Wide	OTA728
— Straight Screwdriver Short	OTA703
— Straight Screwdriver Medium	OTA704
★ SCS Bit Medium	OTA707
★ UniGrip, Short	OTA709
★ UniGrip, Medium	OTA710
● Bit Medium Hex 1.3mm/.050 inch	OTA713
● Bit Medium Hex 1.2mm/.048 inch	OTA716
● Bit Medium Hex 0.9mm/.035 inch	OTA719
■ Bit Medium Square 1.3mm/.050 inch	OTA722